Московский Физико-Технический Институт (государственный университет)

Лабораторная работа по курсу общей физики № 5.4.1

Определение энергии α -частиц по величине их пробега в воздухе

Автор:

Филиппенко Павел Б01-009



Долгопрудный, 2022

Ионизационная камера

Включив питание установки, измерим ток при атмосферном давлении. После этого откачаем воздух и снимем зависимость тока от давления в камере. Результаты измерений представим в таблице 1.

$P_{\text{приьор}}$, мм. рт. ст.	<i>P</i> , мм. рт. ст.	I, pA	I_1 , pA
720	18,8	9	0
710	28,8	25	16
680	58,8	70	61
660	78,8	102	93
640	98,8	132	123
620	118,8	165	156
600	138,8	202	193
570	168,8	249	240
540	198,8	300	291
510	228,8	346	337
480	258,8	404	395
470	268,8	429	420
450	288,8	456	447
430	308,8	494	485
410	328,8	534	525
390	348,8	576	567
370	368,8	611	602
350	388,8	652	643
330	408,8	695	686
310	428,8	735	726
290	448,8	780	771
260	478,8	845	836
230	508,8	900	891
200	538,8	930	921
180	558,8	940	931
160	578,8	940	931
140	598,8	935	926
120	618,8	935	926
100	638,8	930	921
80	658,8	925	916
50	688,8	915	906
30	708,8	910	901
0	738,8	905	896

Таблица 1

По полученным эксперементальным данным построим график зависимости I(P). По графику определим точку перелома.

$$P_0 = 552.97$$
 мм. рт. ст.

Приведем данный к нормальным условиям ($P_n=760$ мм. рт. ст. $T_n=15\ ^oC$), при условии, что пробег, задаваемый камерой R=5 см.

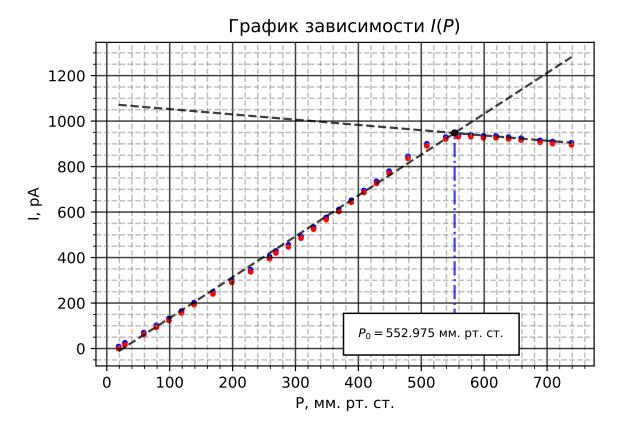


Рис. 1

$$R_n = R \frac{P_0 T_n}{P_n T_0} = 2.48 \text{ cm}$$

Выразим пробег в $\Gamma/\text{см}^3$:

$$R' = \rho R = 3.02 \cdot 10^{-3} \text{ r/cm}^2$$

где ρ – плотность вещества (в нашем случае воздуха). $\rho(15~^oC)=1.2210^{-3}~\mathrm{r/cm^2}.$ Используя формулу $R=0.32E^{\frac{3}{2}}$ оценим энергию α -частицы.

$$E = \left(\frac{R}{0.32}\right)^{2/3} = 3.91 \text{ M} \cdot \text{B}$$

Сравним полученные в ходе эксперемента величины с табличными значениями. Согласно табличным данным, Пробегу α -частицы в воздухе R=2.37 см соответствует энергия частицы E=4.0. Отсюда можно сделать вывод, что полученный в ходе данного эксперемента значения достаточно хорошо соответствует действительности.

Сцинтилляционный счетчик

Используя установку снимим зависимость числа зарегистрированных за 10 с частиц от давления в установке. Результаты представим в таблице 2.

По данным из таблицы 2 построим график зависимости N(P).

Экстрополируя линейную часть графика до пересечения с осью абцисс найдем величину P_{extr} , а так же P_{cp} , что соответсвует значениям R_{extr} и R_{cp} .

$P_{\text{прибор}}$, мм. рт. ст.	P, mm. pt. ct.	N
720	18,8	3602
660	78,8	3439
640	98,8	3276
630	108,8	3073
620	118,8	2893
610	128,8	2743
600	138,8	2534
590	148,8	2344
580	158,8	2181
570	168,8	2034
560	178,8	1761
550	188,8	1656
540	198,8	1370
530	208,8	1124
520	218,8	920
510	228,8	737
500	238,8	541
490	248,8	370
480	258,8	181
470	268,8	170
460	278,8	60
450	288,8	10
420	318,8	3
370	368,8	2
330	408,8	2
260	478,8	2
130	608,8	1
100	638,8	1

Таблица 2

$$P_{extr}=280.95$$
 мм. рт. ст. $\Rightarrow R_{extr}=2.27$ см $\Rightarrow E_{extr}=3.69$ $R_{\rm cp}=178.80$ мм. рт. ст. $\Rightarrow R_{extr}=1.44$ см $\Rightarrow E_{\rm cp}=2.72$

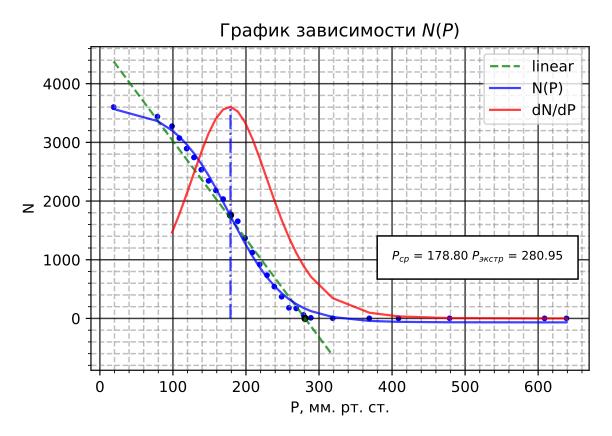


Рис. 2